

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Para realizar un pedido, llame al +1 800 3586046.

Nº. CATÁLOGO	TAMAÑO DEL BALÓN	DESCRIPCIÓN
LPLF-105-I	5 mm x 18 mm	XprESS™ LoProfile 5 mm con PathAssist™ LED Light Fiber™
LPLF-106-I	6 mm x 18 mm	XprESS LoProfile 6 mm con PathAssist LED Light Fiber
LPLF-107-I	7 mm x 18 mm	XprESS LoProfile 7 mm con PathAssist LED Light Fiber
LPLF-205-I	5 mm x 8 mm	XprESS LoProfile 5 mm Compact con PathAssist LED Light Fiber
LPLF-206-I	6 mm x 8 mm	XprESS LoProfile 6 mm Compact con PathAssist LED Light Fiber

ACERCA DE ENTELLUS MEDICAL

Entellus Medical ofrece soluciones terapéuticas innovadoras, mínimamente invasivas y de alta calidad a los profesionales sanitarios y a los pacientes que padecen sinusitis.

www.EntellusMedical.com



Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN, EE. UU. 55447

T +1 866.620.7615
F +1 763.463.1599

Los productos mencionados están autorizados para llevar la marca CE. Los productos pueden no estar disponibles en todos los países.

Indicaciones de uso:

Indicaciones de uso de XprESS: Para el acceso y tratamiento de los ostiums nasosinusales maxilares/infundíbulos etmoidales en pacientes mayores de 2 años, y de los ostiums/recesos frontales y ostiums nasosinusales esfenoidales en pacientes mayores de 12 años mediante un acceso transnasal. Las vías óseas de drenaje de los senos paranasales se remodelan mediante el desplazamiento con balón de las estructuras óseas y los senos paranasales adyacentes.

Indicaciones de uso de PathAssist LED Light Fiber: Para la localización, iluminación interior y transiluminación a través de las estructuras nasales y sinusales.

Consulte en las instrucciones de uso el listado completo de advertencias, precauciones y reacciones adversas.

Precaución: Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.


Entellus, PathAssist, Light Fiber y XprESS son marcas comerciales de Entellus Medical, Inc.

Bibliografía:¹⁻³ Bibliografía publicada o datos de archivo de Entellus Medical.

REALICE VARIOS TRATAMIENTOS NASOSINUSALES CON UN SOLO DISPOSITIVO MULTIFUNCIONAL

DILATACIÓN CON
BALÓN
BUSCADOR
CONFIRMACIÓN
SUCCIÓN
IRRIGACIÓN


TRATE LOS SENOS FRONTALES, ESFENOIDALES Y MAXILARES CON UN ÚNICO DISPOSITIVO MULTIFUNCIONAL

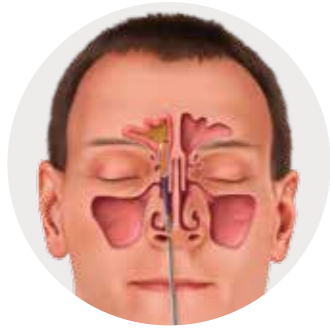

SENO FRONTAL




SENO ESFENOIDAL

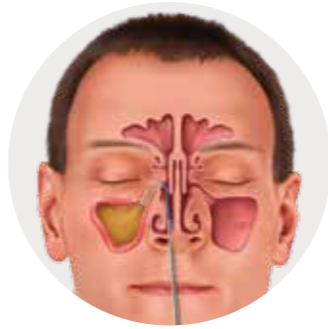

SENO MAXILAR

- Acceso y dilatación con éxito demostrados del ostium natural del seno maxilar y del infundíbulo.¹
- Reducción considerable y clínicamente demostrada de los síntomas nasosinuales.¹
- La dilatación remodela las vías óseas de drenaje de los senos paranasales mediante el desplazamiento de las estructuras óseas y los senos paranasales adyacentes, lo que puede reducir la cantidad de pérdida de tejido en comparación con los procedimientos de FESS tradicionales.^{2,3}

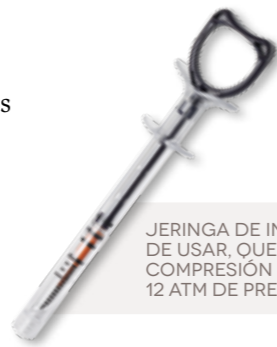

JERINGA DE INFLADO INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR, QUE SOLO REQUIERE UNA ÚNICA COMPRESIÓN PARA ALCANZAR CON FIABILIDAD 12 ATM DE PRESIÓN




MODELADO RÁPIDO DE LA PUNTA MALEABLE CON UNA SENCILLA HERRAMIENTA DE CURVADO

HAGA MÁS CON EL VERSÁTIL Y EFICIENTE SISTEMA DE DILATACIÓN MULTISENO XprESS™ LoPROFILE

VERSATILIDAD SIN IGUAL

- Punta maleable cuya forma puede remodelarse con rapidez para tratar los senos frontales, esfenoidales o maxilares.
- Múltiples tamaños de balón optimizados para una colocación y tratamiento precisos, a fin de responder mejor a las necesidades de los pacientes.
- Compatible con diversas técnicas de confirmación, como PathAssist™ LED Light Fiber™ y visualización directa.

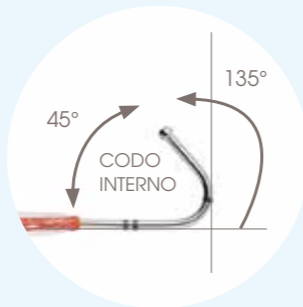

CURVATURA MAXILAR



PUNTA MALEABLE

EFICIENCIA SIN RIVAL

- Herramienta todo en uno, de fácil uso, que optimiza los tratamientos de dilatación nasosinusal.
- Sensación táctil que proporciona una mayor confianza para una colocación rápida y precisa.
- Procedimiento eficiente que se integra con facilidad en el flujo de trabajo del ambulatorio, centro de cirugía ambulatoria o quirófano.
- Formación sencilla del personal con productos de fácil uso y pocos componentes.
- Gestión racionalizada de inventario.

XprESS™ LoProfile

Sistema de dilatación multisenso

El sistema de dilatación multisenso XprESS de Entellus Medical combina con elegancia múltiples funciones en un único dispositivo menos invasivo, diseñado para los procedimientos de dilatación nasosinusal.

- Dilatación con balón
- Buscador
- Confirmación
- Succión
- Irrigación

LoPROFILE DE 5 MM, 6 MM Y 7 MM



UNA COMPRESIÓN DE LA JERINGA DE INFLADO CON UNA SOLA MANO APORTA 12 ATM EXACTAS CADA VEZ



XprESS LoPROFILE 5 MM Y 6 MM COMPACT

PUNTA MALEABLE QUE PUEDE MODELARSE CON RAPIDEZ PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SENOS FRONTALES, ESFENOIDALES Y MAXILARES

LA INTEGRACIÓN DE PATHASSIST™ LED LIGHT FIBER™ PROPORCIONA UNA ILUMINACIÓN DE ALTA INTENSIDAD PARA LA CONFIRMACIÓN

PUNTA ESFÉRICA DE 1,75 MM PARA EL TRATAMIENTO DE ESPACIOS REDUCIDOS

SUAVE AVANCE DEL BALÓN CON UN SOLO DEDO

DISEÑO CONFORTABLE CON ORIFICIO DE SUCCIÓN PARA YEMA DEL DEDO INTEGRADO

PATHASSIST™ LED LIGHT FIBER™ CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADA, QUE NO REQUIERE FUENTES DE ILUMINACIÓN NI CABLES ADICIONALES

PUERTO INTEGRADO DE SUCCIÓN/IRRIGACIÓN PARA LIMPIAR EL CAMPO DE VISIÓN PARA UNA MAYOR EFICIENCIA



PUERTO DE INFLADO QUE SE CONECTA FÁCILMENTE A UN DISPOSITIVO DE INFLADO PARA UNA MANO

